



BYLIV

C300 Corpus er en smart lille el-kørestol med et frækt design og gode egenskaber. Lille, hurtig og smidig gør den til en perfekt stol, til brug i bymiljøet. Du kan nemt komme frem i trange gader og forretningskvarterer. Corpus sædet er desuden et af verdens mest populære sædesystemer, med ergonomisk ryg og indbyggede lænde og sidestøtter. Corpus sædets modulsystem gør det muligt at ændre størrelsen, samt montere ekstra funktioner, efter behov. En perfekt kombination der bringer dig derhen du vil.

C300
CORPUS

permobil

The Art of Mobility™

EL-FUNKTIONER



Elektrisk tilt.

CHASSISFARVER



Blå

Grøn

Sort

Rød



Elektrisk sædeløft.



Elektrisk justerbare benstøtter.




Elektrisk justerbar ryg.



R-net elektronik med ICS. Du kan anvende alle el-funktioner; alle alternative styreformere. Med ICS systemet kan man gemme sine favorit sidde positioner.



UniTrack tillbehørssystem. Du vælger dele og sammensætter en komplet støtte, der passer til dig. Den enkle løsning med skinne, leder og snaplås giver mulighed for hurtigt at ændre stilling og vinkel.

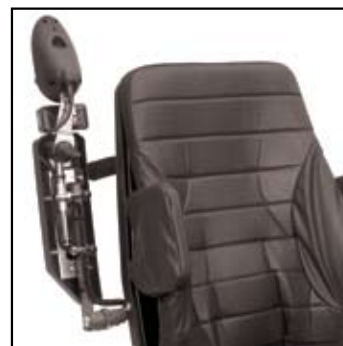

Armlænene er lette at folde op.

C300 CORPUS™ SPECIFIKATIONER

Vægt inkl. batterier	138 kg	Sædebredde	430/480 mm	Kørestrækning	30–35 km
Længde	1080 mm	Sædeybde	410–560 mm	Maks. hastighed	7 km/h
Bredde	620 mm	Ryglænsøjde	535/605 mm	Venderadius	625 mm
Mindste transportlængde	885 mm	Armlænsøjde	justerbar	Kan køre over kanter	70 mm
Sædehøjde	510–710 mm	Batterikapacitet	2x60 Ah	Brugers maks.-vægt	120 kg



The Art of Mobility™

Permobil AS, Måløv Værkstedby 59, DK-2760 Måløv, Danmark. Tel: +45 44681406. Fax: +45 44682406. E-post: mail@permobil.dk

www.permobil.dk